

Remeda

SYSTÈMES DE CHARGEMENT



Simplification du travail
dans les services centraux
de stérilisation

Systèmes de chargement

Un haut niveau de qualité et d'efficacité impose des exigences élevées au personnel et à l'équipement médicaux. Malgré les nouvelles technologies, certains travaux submergent toujours le personnel médical de nos jours.

Les produits de Remeda fournissent des solutions plus simples et plus efficaces pour le travail dans les services chirurgicaux et les services de stérilisation centraux.

Les systèmes de chargement de Remeda ont été développés pour créer une manutention plus efficace des objets à l'hôpital, sans imposer de pression au personnel.

Remeda dispose d'une grande variété de solutions de chargement et de transport différentes. Des systèmes de chargement manuels qui utilisent des chariots à hauteur fixe et des introducteurs de paniers ou de racks aux systèmes multi-charge-

ments dans lesquels un multichargeur charge une ligne de stérilisateurs depuis un ou plusieurs convoyeurs.

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur le site Web de Remeda, www.remeda.com.

Nos produits sont présents dans le monde entier



Remeda est une société de technologie médicale dédiée à l'ergonomie. Nos produits sont développés pour contribuer à réduire la pression du travail à l'hôpital.

100 41 Chargeur automatique

Les chargeurs automatiques de Remeda sont destinés au service de stérilisation central pour faciliter le chargement et le déchargement des paniers et des racks. Associé aux chariots de transport Remeda, le chargeur automatique est un excellent outil pour simplifier le travail et l'exécuter plus efficacement dans le service de stérilisation central.

Les chargeurs automatiques de Remeda sont conçus pour charger et décharger des paniers et des racks. Ils entrent dans un autoclave avec une ouverture de chambre de 660-700 mm, la commande du chargeur est intégrée à la commande du stérilisateur. Différentes combinaisons de chargement de manuel et de déchargement automatique peuvent être réalisées.

Remeda dispose d'un large éventail de chariots de chargement et de transport optimisés pour une utilisation avec les chargeurs automatiques Remeda.

Numéro de référence	Prof. chambre stérilisateur mm	Type de charge
100 41-00	600-700	Panier
100 41-01	900-1000	Panier
100 41-02	1200-1300	Panier
100 41-03	1600-1700	Panier
100 41-04	1900-2000	Panier
100 41-10	600-700	Rack
100 41-11	900-1000	Rack
100 41-12	1200-1300	Rack
100 41-13	1600-1700	Rack
100 41-14	1900-2000	Rack



100 52 Chariot de transport

Le chariot de transport de Remeda est utilisé avec le chargeur automatique ou des convoyeurs dans le service de stérilisation central. La hauteur du chariot peut être réglée afin que le chargement et le déchargement se fassent à la hauteur de travail adéquate. Grâce au système de levage unique, le chariot est exceptionnellement facile à nettoyer.

Le réglage de la hauteur est électrique et piloté par une commande d'emploi simple placée sur la poignée. Le chariot est livré avec un chargeur pour la batterie. La poignée est montée sur la partie inférieure du chariot et reste à la hauteur normale. Le haut du chariot est conçu pour le transport de paniers et de racks sans roues.

Le chariot est fabriqué en acier inoxydable avec un châssis en tubes d'acier inoxydable. Il est muni de quatre roues d'un diamètre de 150 mm, dont 2 avec freins et 2 avec blocage de direction. Le chariot est également disponible dans une version à hauteur fixe.

Numéro de référence	Réglage de la hauteur mm	Capacité, paniers
100 52-01	590-890	4 DIN
100 52-11	640-990	4 DIN
100 52-21	690-1090	4 DIN
100 53-02	590-890	6 ISO ou 6 SPRI
100 53-12	640-990	6 ISO ou 6 SPRI
100 53-22	690-1090	6 ISO ou 6 SPRI
100 52-02	590-890	6 DIN
100 52-12	640-990	6 DIN
100 52-22	690-1090	6 DIN
100 52-03	590-890	8 DIN ou 9 ISO ou 9 SPRI
100 52-13	640-990	8 DIN ou 9 ISO ou 9 SPRI
100 52-23	690-1090	8 DIN ou 9 ISO ou 9 SPRI
Hauteur fixe mm		
101 52-01	800-900	4 DIN
101 52-11	900-1000	4 DIN
101 52-02	800-900	6 DIN
101 52-12	900-1000	6 DIN
101 52-03	800-900	8 DIN ou 9 ISO ou 9 SPRI
101 52-13	900-1000	8 DIN ou 9 ISO ou 9 SPRI



100 80 Chariot de chargement

Le chariot de chargement Remeda est conçu pour charger et décharger les chambres des stérilisateur. Il est possible de placer sur le haut du chariot un introducteur de panier ou un rack d'étagères/plate-forme de transfert en fonction du type d'objets à manipuler. La hauteur du chariot peut être réglée afin que le chargement et le déchargement se fassent à la hauteur de travail adéquate. Grâce au système de levage unique, le chariot est exceptionnellement facile à nettoyer.

Le réglage de la hauteur est électrique et piloté par une commande d'emploi simple placée sur la poignée. Le chariot est livré avec un chargeur pour la batterie. La poignée est montée sur la partie inférieure du chariot et reste à la hauteur normale. Le dessus est muni d'un système de guidage et de verrouillage, pour bloquer le chariot dans les rails de la chambre de l'autoclave. Le chariot est fabriqué en acier inoxydable avec un châssis en tubes d'acier inoxydable. Il est muni de quatre roues d'un diamètre de 150 mm, dont 2 avec freins et 2 avec blocage de direction.

Le chariot est destiné aux autoclaves avec une largeur d'ouverture de chambre carrée d'environ 660-700 mm.

Le chariot est également disponible dans une version à hauteur fixe.

Numéro de référence	Réglage de la hauteur mm	Prof. chambre mm
100 80-01	560-860	600-700
100 80-11	610-960	600-700
100 80-21	660-1060	600-700
100 80-02	560-860	900-1000
100 80-12	610-960	900-1000
100 80-22	660-1060	900-1000
100 80-03	560-860	1200-1300
100 80-13	610-960	1200-1300
100 80-23	660-1060	1200-1300
100 80-04	560-860	1600-1700
100 80-14	610-960	1600-1700
100 80-24	660-1060	1600-1700
Hauteur fixe mm		
101 80-01	800-900	600-700
101 80-11	900-1000	600-700
101 80-02	800-900	900-1000
101 80-12	900-1000	900-1000
101 80-03	800-900	1200-1300
101 80-13	900-1000	1200-1300
101 80-04	800-900	1600-1700
101 80-14	900-1000	1600-1700



100 61 Introducteur de paniers

L'introducteur de paniers de Remeda est conçu pour simplifier le chargement des paniers dans un stérilisateur. L'introducteur de paniers est utilisé en association avec le chariot de chargement Remeda et les rails de la chambre.

Le panier est placé sur l'introducteur de paniers, puis la partie supérieure de l'introducteur de paniers est levée. L'introducteur de paniers et les paniers peuvent alors être transférés dans la chambre du stérilisateur. L'introducteur de paniers est abaissé et les paniers sont placés sur les rails de la chambre. L'introducteur de paniers peut ensuite être sorti sur le chariot de chargement. Lorsque l'introducteur de paniers est transporté sur le chariot de chargement, un système de verrouillage de transport empêche l'introducteur de paniers de tomber. L'introducteur de paniers est fabriqué en tubes d'acier inoxydable. L'introducteur de paniers est conçu pour les autoclaves avec une ouverture de chambre carrée d'une largeur de 660-700 mm, il est disponible en différentes longueurs. La profondeur exacte de la chambre doit être spécifiée au moment de la commande.

Numéro de référence	Prof. chambre mm	Pour rail de chambre
100 61-01	600-700	100 61-51
100 61-02	900-1000	100 61-52
100 61-03	1200-1300	100 61-53
100 61-04	1600-1700	100 61-54



100 64 / 100 65 Rack d'étagères

Le rack d'étagères de Remeda s'utilise avec un chariot ou un chargeur automatique pour transporter les objets dans les stérilisateurs. Le rack d'étagères fabriqué en acier inoxydable permet de pré-charger les objets sur la table d'emballage, où les paniers, conteneurs ou paquets peuvent être placés. Le rack d'étagères est utilisé dans un flux de circulation, il est renvoyé du côté de chargement propre après le processus de stérilisation.

Numéro de référence	Longueur mm	Largeur mm	Pour type de chariot
100 65-01	630	608	100 52
100 65-02	930	608	100 52
100 65-03	1260	608	100 52
100 64-01	630	608	100 80
100 64-02	930	608	100 80
100 64-03	1260	608	100 80



100 64 / 100 65 Plate-forme de transfert

La plate-forme de transfert de Remeda s'utilise avec un chariot ou un chargeur automatique pour transporter les objets dans les stérilisateurs. La plate-forme fabriquée en acier inoxydable permet de pré-charger les objets sur la table d'emballage, où les paniers, conteneurs ou paquets peuvent être placés. La plate-forme de transfert est utilisée dans un flux de circulation, elle est renvoyée du côté de chargement propre après le processus de stérilisation.

Numéro de référence	Longueur mm	Largeur mm	Pour type de chariot
100 65-11	630	608	100 52
100 65-12	930	608	100 52
100 65-13	1260	608	100 52
100 64-11	630	608	100 80
100 64-12	930	608	100 80
100 64-13	1260	608	100 80



100 88 Chariot de chargement

Le chariot de chargement Remeda est conçu pour charger et décharger les stérilisateurs des services de stérilisation et de chirurgie. Le chariot est utilisé avec une plate-forme de transfert qui est roulée dans la chambre. La plate-forme repose sur le sol de la chambre.

La hauteur du chariot peut être réglée afin que le chargement et le déchargement se fassent à la hauteur de travail adéquate. Grâce au système de levage unique, le chariot est exceptionnellement facile à nettoyer. Le réglage de la hauteur est électrique et piloté par une commande d'emploi simple placée sur la poignée. Le chariot est livré avec un câble de charge pour la batterie. La poignée est montée sur la partie supérieure du chariot. Le chariot est fabriqué en acier inoxydable avec un châssis en tubes d'acier inoxydable. Il est muni de quatre roues d'un diamètre de 100mm, dont 2 avec freins et 2 avec blocage de direction.

Le chariot est destiné aux autoclaves avec une largeur d'ouverture de chambre carrée d'environ 460 mm.


La hauteur de chargement doit être spécifiée sur la commande.

Numéro de référence	Réglage de la hauteur mm	Prof. chambre mm	Plate-forme
100 88-01	550-850	660	100 88-21
100 88-02	600-950	960	100 88-22
100 88-11	550-850	660	100 88-21
100 88-12	600-950	960	100 88-22



Chargeur au sol

Le chargeur au sol de Remeda est conçu pour charger et décharger les stérilisateurs installés au sol ou en fosse. Il existe différentes versions de chargeurs au sol en fonction du type des stérilisateurs, des chariots de transport utilisés et de l'installation des stérilisateurs. Le chargeur est conçu pour charger ou décharger les plus grands racks sur roues et sera construit pour s'adapter aux racks standard déjà utilisés par le service de stérilisation central.

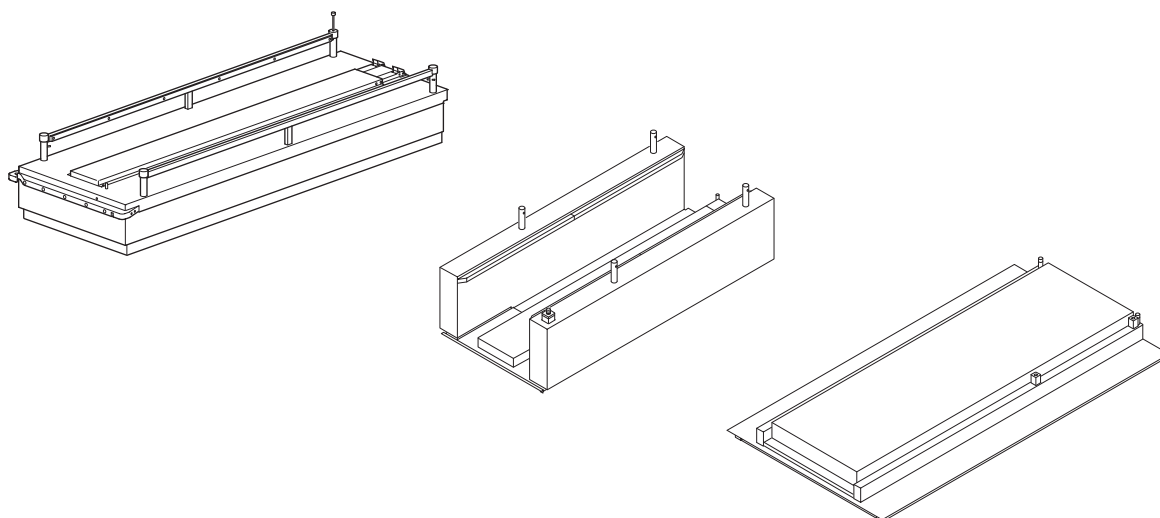

MultiLoader


Le MultiLoader de Remeda est un système complètement automatisé qui utilise un point de chargement et de déchargement de paniers ou de racks unique.

Il est conçu pour minimiser la manutention des objets par le personnel et peut fonctionner dans un lieu de travail fermé sans nécessiter de supervision.

La navette du MultiLoader reçoit les objets d'un ou plusieurs convoyeurs et les charge dans le stérilisateur lorsqu'il est disponible. Le système de commande intégré commande le nombre de cycles de chaque stérilisateur et sélectionne le stérilisateur avec le moins de cycles. Ceci est fait afin de veiller à ce que tous les stérilisateurs soient utilisés de la même façon. La commande du chargeur communique avec la commande du stérilisateur.

Le MultiLoader de Remeda est adapté à un service de stérilisation à l'espace limité ou lorsque les stérilisateurs sont situés dans un espace fermé.

Différentes combinaisons avec multi chargement et déchargement automatiques peuvent être réalisées. Remeda dispose d'une large gamme de chariots de chargement et de transport optimisés pour l'utilisation avec le MultiLoader.

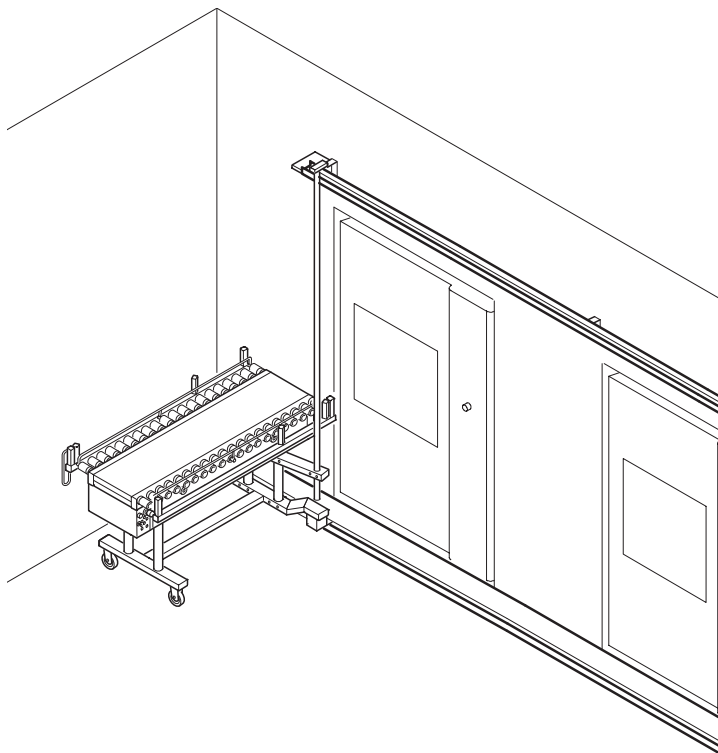


DualLoader

Le DualLoader de Remeda est conçu pour charger/décharger des paniers ou des racks sur les stérilisateurs à porte unique.

Le DualLoader a un côté de chargement et un côté de déchargement. Le Dual loader est également disponible dans une version de MultiLoader pour les stérilisateurs à porte unique. La commande du chargeur communique avec la commande du stérilisateur.

Remeda dispose d'une large gamme de chariots de chargement et de transport optimisés pour l'utilisation avec le DualLoader.

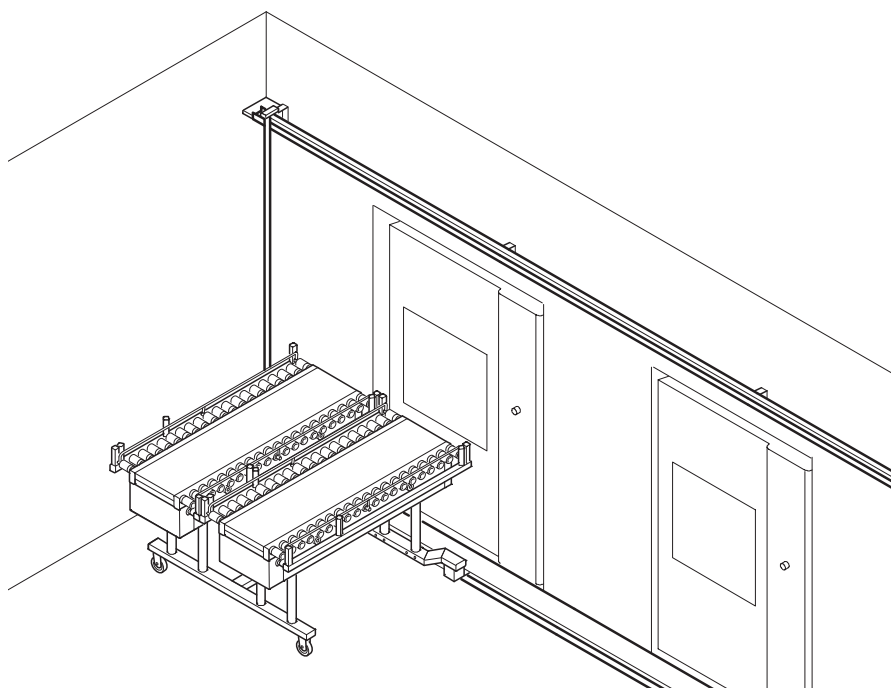



Nos produits sont présents dans le monde entier

Remeda est une société familiale fondée en 1990 qui a son siège social à Halmstad, en Suède.

Nos produits sont fabriqués en Suède et notre marché est mondial. Les ventes se font via des distributeurs locaux et en collaborations avec d'autres sociétés de l'industrie des technologies médicales.

Remeda

Remeda AB
P O Box 8002, SE-300 08 Halmstad
SWEDEN

Phone: +46 (0) 35 15 84 70
Fax: +46 (0) 35 15 84 60
E-mail: remeda@remeda.com
www.remeda.com